


LABORATORIO PRÓTESIS OCULAR

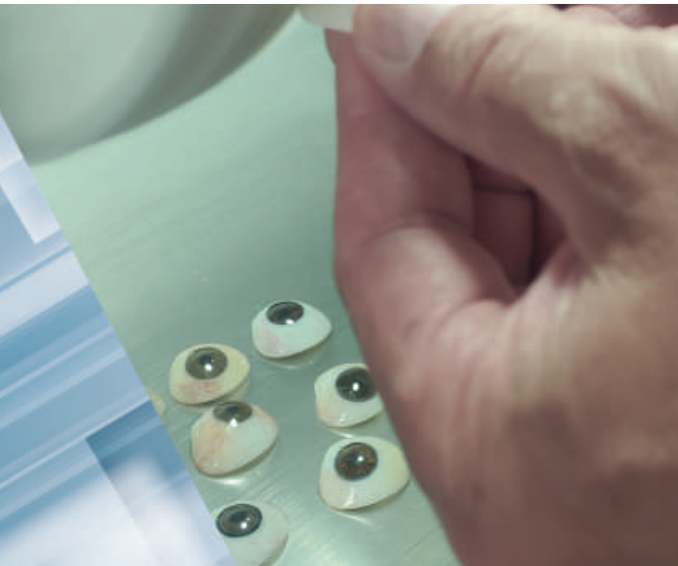

QUÉ INCLUYE EL SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN:

- Consulta con especialista en Oculoplastia.
- Valoración especializada por Ocularista.
- Suministro y adaptación de prótesis oculares.
- Garantía del producto por un (1) año a partir de la fecha de entrega.
- Recomendaciones del cuidado, limpieza y desinfección de las prótesis.
- Valoración final con especialista en Oculoplastia.

CLASES DE PRÓTESIS OFTALMOLÓGICAS:

- Cascarilla
- Semicascarilla
- Tamaños (Grandes, medianas y pequeñas)
- Con movimiento de acuerdo con el musculo de la cavidad.

VIDA ÚTIL:

Aproximadamente de 8 a 10 años, dependiendo del uso, cuidado y de acuerdo con recomendaciones por el especialista en Oculoplastia. Se recomienda realizar el mantenimiento de manera anual en nuestro laboratorio para evaluar la cavidad, pulir la prótesis y asegurar la vida útil de ésta.



citas@barraquer.com.co
servicioalcliente@barraquer.com.co
+60(1)218 88 87 - 218 70 77 opc. 2 citas
Calle 100 No 18 A - 51 Bogotá, Colombia



CUIDADO Y LIMPIEZA DE PRÓTESIS OCULARES:

- De acuerdo por recomendaciones médicas es importante lubricar las prótesis oculares en forma periódica con gotas oftálmicas, para evitar la sequedad ocular.
- No se debe quitar la prótesis ocular durante varios días seguidos debido a la dificultad que puede presentarse el volver a colocarla.
- Se recomiendan líquidos para lentes de contacto flexibles o de gas permeable para la limpieza de las prótesis oculares.
- Nunca use alcohol para limpiar las prótesis oculares.
- Nunca use un paño seco.
- Es aconsejable realizar una limpieza de las prótesis oculares una vez al mes, para evitar la adherencia de depósitos proteicos que van depositando la lagrime sobre la superficie de las prótesis.
- La limpieza también se puede realizar sin tener que retirar las prótesis oculares, utilizando un algodón húmedo y realizando suaves movimientos hacia la parte nasal.

TENER EN CUENTA:

- Realizar un control pulido de las prótesis oculares en nuestro laboratorio una vez al año.
- Las prótesis oculares se usan en un medio húmedo y cargado de bacterias, que a lo largo del tiempo pueden formar adherencias.
- Las prótesis oculares pueden rayarse y desgastarse.
- Es muy importante saber que cualquier textura sobre una prótesis ocular puede causar inflamación de la membrana.
- Cuando el acrílico envejece, aumenta su porosidad y en consecuencia se acumulan bacterias que producen aumento de secreción, cuando esto ocurre, ha llegado la hora de cambiar su prótesis ocular.

PRECAUCIONES:

- Proteger permanentemente las prótesis oculares con anteojos.
- No debe exponerse a deportes de alto riesgo o impacto como, fútbol, boxeo, básquetbol, squash, entre otros.
- Se aconseja utilizar gafas para natación al momento de realizar actividades como piscinas, ríos, mar, baños turcos, y saunas, por la facilidad con que puede salir las prótesis oculares.



citas@barraquer.com.co
servicioalcliente@barraquer.com.co
+60(1)218 88 87 - 218 70 77 opc. 2 citas
Calle 100 No 18 A - 51 Bogotá, Colombia

