

# LABORATORIO DE PRÓTESIS OCULAR

Estas prótesis oculares se realizan en los casos que el paciente debido a traumas, tumores, enfermedades, accidentes, factores congénitos, agresiones físicas, entre otras, es necesario extraer el globo ocular.

Para el suministro y adaptación de prótesis oculares el paciente es valorado por nuestros especialistas en Oculoplástia, el cual evaluará ciertos factores para luego ser remitido al ocularista, quien se encargará del diseño, fabricación y adaptación de las prótesis oculares.

Durante más de 50 años, en promedio hemos realizado 20.000 prótesis oculares mejorando satisfactoriamente la apariencia estética de los colombianos.



## Que incluye el suministro y adaptación:

- ✓ Consulta con especialista en Oculoplastia.
- ✓ Valoración especializada por Ocularista
- ✓ Suministro y adaptación de prótesis oculare
- ✓ Garantía del producto por un (1) año a partir de la fecha de entrega
- ✓ Recomendaciones del cuidado, limpieza y desinfección de las prótesis.
- ✓ Valoración final con especialista en Oculoplastia




## Clases de prótesis oftalmológicas:

- ✓ Cascarilla
- ✓ Semicascarilla
- ✓ Tamaños (Grandes, medianas y pequeñas)
- ✓ Con movimiento de acuerdo con el musculo de la cavidad



## Vida útil de la prótesis

- ✓ Aproximadamente de **8 a 10 años**, dependiendo del uso, cuidado y de acuerdo con recomendaciones por el especialista en Oculoplastia. Se recomienda realizar el mantenimiento de manera anual en nuestro laboratorio para evaluar la cavidad, pulir la prótesis y asegurar la vida útil de ésta.

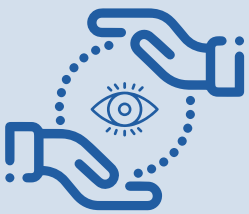

## Cuidado y limpieza de prótesis oculares:

- ✓ De acuerdo por recomendaciones médicas es importante lubricar las prótesis oculares en forma periódica con gotas oftálmicas, para evitar la sequedad ocular.
- ✓ No se debe quitar la prótesis ocular durante varios días seguidos debido a la dificultad que puede presentarse el volver a colocarla.
- ✓ Se recomiendan líquidos para lentes de contacto flexibles o de gas permeable para la limpieza de las prótesis oculares
- ✓ Nunca use alcohol para limpiar las prótesis oculares
- ✓ Nunca use un paño seco
- ✓ Es aconsejable realizar una limpieza de las prótesis oculares una vez al mes, para evitar la adherencia de depósitos proteicos que van depositando la lagrima sobre la superficie de las prótesis
- ✓ La limpieza también se puede realizar sin tener que retirar las prótesis oculares, utilizando un algodón húmedo y realizado suaves movimientos hacia la parte nasal



## Tener en cuenta:

- ✓ Realizar un control pulido de las prótesis oculares en nuestro laboratorio una vez al año.
- ✓ Las prótesis oculares se usan en un medio húmedo y cargado de bacterias, que a lo largo del tiempo pueden formar adherencias.
- ✓ Las prótesis oculares pueden rayarse y desgastarse
- ✓ Es muy importante saber que cualquier textura sobre una prótesis ocular puede causar inflamación de la membrana.
- ✓ Cuando el acrílico envejece, aumenta su porosidad y en consecuencia se acumulan bacterias que producen aumento de secreción, cuando esto ocurre, ha llegado la hora de cambiar su prótesis ocular.



## Precauciones:

- ✓ Proteger permanentemente las prótesis oculares con anteojos.
- ✓ No debe exponerse a deportes de alto riesgo o impacto como, futbol, boxeo, básquetbol, squash, entre otros.
- ✓ Se aconseja utilizar gafas para natación al momento de realizar actividades como piscinas, ríos, mar, baños turcos, y saunas, por la facilidad con que puede salir las prótesis oculares.

**Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que su estudio permita un correcto diagnóstico.**